

核酸実験用試薬 キャンペーン

キャンペーン期間 2019.12.1～2020.3.31

大好評のDNA蛍光染色試薬が遂にキャンペーン対象品に!!

DNA蛍光染色試薬

サンプルに混ぜる試薬

◎青緑LEDに最適 (Non UV)


・ GRG-1000 GRGreen Loading Buffer 6X 容量1ml

◎UVに最適

・ GRR-1000 GRRed Loading Buffer 6X 容量1ml

定価 ~~¥8,000~~ 10%off → キャンペーン価格 ¥7,200

さらに5本セットで **20%off**
定価 ~~¥40,000~~ → キャンペーン価格 ¥32,000

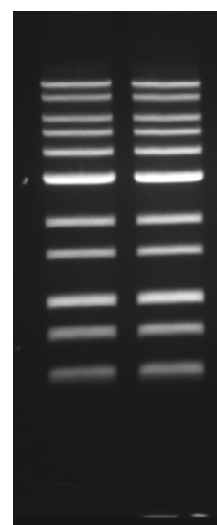

↑
試薬: GRG-1000
照射装置: LI-410 (青緑LED)
撮影装置: SK-470 (デジカメ)

後染め試薬

◎青緑LEDに最適 (Non UV)

・ GRG-500 GRG Post Stain in water 10000X 容量0.5ml

◎UVに最適

・ GRR-500 GRR Post Stain in water 10000X 容量0.5ml

定価 ~~¥19,800~~ 10%off → キャンペーン価格 ¥17,820

さらに5本セットで **20%off**
定価 ~~¥99,000~~ → キャンペーン価格 ¥79,200

※裏面にQ&A、アガロース情報あります。ぜひご覧ください。

BC BIO CRAFT

アガロース

日常的なDNA, RNAの分離に大活躍！低コスト！！
サンプルのご用意でございます。お気軽にご依頼下さい。

・PA-G120 アガロース

容量200g(100g×2本)

定価 ~~¥21,000~~ **10%off** → キャンペーン価格 ¥18,900

・PA-G150 アガロース

容量500g(100g×5本)

定価 ~~¥47,000~~ **20%off** → キャンペーン価格 ¥37,600

DNA蛍光染色試薬GRシリーズ Q&A

Q1 変異原性は？

A1 AMES Test を実施し、変異原性はほとんどないとの結果を得ています。
ただし、核酸と結合する試薬になる為、取扱いの際は必ず手袋を着用して下さい。

Q2 廃棄方法は？

A2 試薬自体に決まりは御座いません。ラボのルールに従って廃棄して下さい。

Q3 あらかじめゲルに加えて使用することは可能ですか？

A3 後染め試薬(GRG-500,GRR-500)は使用出来ますが、後染め方法に比べ、シャープなバンドになりません。

Q4 保存方法、使用期限は？

A4 遮光した状態で冷蔵(4℃)で保存して下さい。1年間使用可能です。
長期保存する場合は冷凍(-20℃)で保存して下さい。

Q5 移動度の違いは起きますか？

A5 サンプルに混ぜる試薬に関しましては、サンプルによっては移動度の違いが起こる場合がございます。

Q6 使用の注意点やコツはありますか？

A6 使用前にボルテックスにより混合後、使用して下さい。
サンプルに混ぜる試薬に関しては、サンプルに混ぜ、5分程おいてからアプライして下さい。

BC BIO CRAFT

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9

TEL 03-3964-6561 FAX 03-3964-6443

e-mail info@bio-craft.co.jp

●この内容は2019年12月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税別です。

●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。